



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C12Q 1/68	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 96/15261 (43) Date de publication internationale: 23 mai 1996 (23.05.96)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR95/01491 (22) Date de dépôt international: 13 novembre 1995 (13.11.95) (30) Données relatives à la priorité: 94/13622 14 novembre 1994 (14.11.94) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT PASTEUR [FR/FR]; 28, rue du Docteur-Roux, F-75724 Paris Cédex 15 (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): STONNET, Véronique [FR/FR]; 24, rue de la Sablière, F-92600 Asnières (FR). GUESDON, Jean-Luc [FR/FR]; 33, Grande Rue, F-92310 Sèvres (FR). (74) Mandataire: LE GUEN, Gérard; Cabinet Lavoix, 2, place d'Estienne-d'Orves, F-75441 Paris Cédex 09 (FR).		(81) Etats désignés: CA, CN, JP, US. Publiée <i>Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport.</i>
(54) Title: NUCLEOTIDE SEQUENCES HYBRIDIZING SPECIFICALLY WITH A GENOMIC NUCLEIC SEQUENCE OF CAMPYLOBACTER (54) Titre: SEQUENCES NUCLEOTIDIQUES HYBRIDANT SPECIFIQUEMENT AVEC UNE SEQUENCE NUCLEIQUE GENOMIQUE DE CAMPYLOBACTER (57) Abstract <p>The present invention relates to a nucleic acid sequence isolated from <i>C. coli</i> which hybridizes specifically with the genomic nucleic acid of strains belonging to the species <i>C. coli</i> and which does not hybridize in usual conditions with the nucleic acids of campylobacteria which do not belong to said species, neither with the genomic nucleic acids of bacteria close to the genus <i>Campylobacter</i>. Fragments of said sequence may be used as specific primers for the amplification of specific sequences of <i>Campylobacter coli</i> and as nucleic probes specific to nucleic sequences of <i>Campylobacter coli</i>. The invention also relates to a method for detecting the presence of strains of <i>Campylobacter coli</i> in a biological sample as well as to a kit for implementing such method.</p> (57) Abrégé <p>La présente invention a pour objet une séquence d'acide nucléique isolée de <i>C. coli</i> qui hybride spécifiquement avec l'acide nucléique génomique des souches appartenant à l'espèce <i>C. coli</i> et qui n'hybride pas dans les conditions habituelles avec les acides nucléiques de campylobactéries n'appartenant pas à cette espèce, ni avec les acides nucléiques génomiques de bactéries proches du genre <i>Campylobacter</i>. Des fragments de cette séquence peuvent être utilisés comme amorces spécifiques pour l'amplification de séquences spécifiques de <i>Campylobacter coli</i> et comme sondes nucléiques spécifiques de séquences nucléiques de <i>Campylobacter coli</i>. L'invention a également pour objet une méthode de détection de la présence de souches de <i>Campylobacter coli</i> dans un échantillon biologique, ainsi qu'un kit pour la mise en œuvre de la méthode.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
AU	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CG	Congo	KR	République de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LV	Lettonie	TG	Togo
CZ	République tchèque	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
FR	France			VN	Viet Nam
GA	Gabon				

- 1 -

Séquences nucléotidiques hybridant spécifiquement avec une séquence nucléique génomique de *Campylobacter*

La présente invention se rapporte à une séquence nucléique spécifique de *Campylobacter coli*, ainsi qu'aux applications de cette séquence en tant que sonde nucléotidique spécifique pour la détection de
5 séquences de *Campylobacter coli* ou de fragments de cette séquence comme amorces nucléotidiques pour l'amplification d'ADN ou d'ARN de *Campylobacter coli* dans un échantillon biologique.

Les infections à *Campylobacter* sont très
10 répandues dans le monde entier, affectant aussi bien l'homme que les animaux sauvages ou domestiques.

Bien que découvertes au début du vingtième siècle, les bactéries appelées actuellement *Campylobacter* furent longtemps méconnues, car leurs particularités
15 rendaient leur identification et leur culture difficiles. D'abord isolés chez les ovidés et les bovidés et appelés *Vibrio fetus* puis, plus tard, *Campylobacter fetus*, ce n'est qu'à partir de 1946 que les premiers cas de campylobactérioses humaines ont été décrits, mais ce
20 n'est qu'à partir de 1972, lorsque des milieux sélectifs pour *Campylobacter* ont commencé à être mis au point, que l'importance des infections à *Campylobacter* a pu être prouvée et reconnue.

Depuis la désignation de l'espèce type
25 *Campylobacter fetus*, une douzaine d'autres espèces et sous-espèces ont été découvertes, le nombre exact variant selon les auteurs et les méthodes taxonomiques, qui proposent souvent de nouveaux critères de classification. Parmi ces espèces, les plus rencontrées en pathologie
30 humaine et/ou animale sont *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli* et *Campylobacter fetus*.

Actuellement, *Campylobacter jejuni* et *Campylobacter coli* sont fréquemment responsables de

diarrhée infectieuse chez l'homme.

Le "réseau de surveillance nationale des infections à *Campylobacter*", mis en place en France en 1986, publie chaque année un bilan faisant ressortir les principales données épidémiologiques et cliniques des cas rapportés.

Dans l'espèce humaine, le symptôme majeur de l'infection intestinale à *C. jejuni* ou à *C. coli* est la diarrhée qui, dans les cas les plus graves peut entraîner de fortes pertes hydriques, ce qui peut être particulièrement dangereux pour les enfants et les nourrissons, très sensibles à la déshydratation. Cependant, l'entérite à *Campylobacter* reste souvent sans complications et les diarrhées peuvent même cesser spontanément au bout d'une semaine. Toutefois, les coprocultures peuvent rester positives jusqu'à quelques semaines ou même mois, et, dans 5 à 10% des cas, des rechutes peuvent survenir. Un traitement et un suivi rigoureux s'imposent donc, surtout pour les sujets immunodéprimés ou ayant des maladies graves (SIDA, cirrhose du foie, cancer, leucémie, etc.), chez lesquels les *Campylobacter* peuvent se comporter comme des bactéries opportunistes.

D'autres conséquences des infections à *C. jejuni* ou *C. coli* ont également été décrites, bien que plus rares ou exceptionnelles : adénite mésentérique, cholécystite, infections urinaires, méningites, septicémies, érythème noueux ou syndrome de Guillain-Barré, etc.

Chez les animaux, les *Campylobacter* vivent habituellement en commensaux dans le tube digestif de nombreuses espèces : bovins, ovins, porcs, volailles, oiseaux sauvages, chiens et chats. Ces animaux, malades ou porteurs sains, constituent un large réservoir de germes, et donc un risque important de contamination. Dans le cas d'infections évidentes, chez les bovins et ovins, *C. jejuni* est connu, depuis la première descrip-

tion en 1931, comme étant la cause de la "dysenterie du bétail", qui peut avoir pour conséquence, outre l'effet sur le bétail, la transmission à l'homme à travers la dissémination des germes dans l'environnement des animaux (terre, eaux). Même pour des animaux asymptomatiques, "porteurs sains", la transmission à l'homme peut se faire : soit par contact direct avec ces animaux ou leurs déjections, soit par consommation d'aliments ou d'eaux souillés (viandes contaminées pendant leur préparation et mal cuites, lait non pasteurisé, eau polluée, etc.).

Dans une optique de prévention, il est important donc, tant chez l'homme que chez l'animal, de pouvoir identifier le pathogène *C. jejuni* ou *C. coli* le plus tôt possible, afin d'empêcher, par des mesures adéquates, toute contamination. Ceci est particulièrement le cas dans l'industrie agro-alimentaire, où des conditions de stérilité doivent être respectées. C'est également important en pathologie humaine, pour effectuer un suivi correct des malades traités à la suite d'une infection à *Campylobacter*, afin d'éviter toute nouvelle rechute.

Enfin, dans le cas d'infections déclarées, il est très important de bien identifier le germe responsable, et ceci rapidement après le déclenchement de la maladie, afin de pouvoir appliquer un traitement correct et efficace qui empêcherait l'évolution de l'infection, voire la propagation d'épidémies. Or, l'identification des *Campylobacter* et la détermination de l'espèce incriminée n'est pas aisée. En effet, leur isolement nécessite des milieux spéciaux et leur détection classique ne se fait actuellement qu'après un enrichissement par culture d'au moins 48 heures. Ceci est très long lorsqu'un diagnostic rapide est nécessaire. D'autre part, étant donné que le diagnostic microbiologique se fait actuellement par des techniques bactériologiques et/ou

biochimiques qui exploitent des différences phénotypiques existant entre les différentes espèces, des erreurs de diagnostic peuvent se produire, surtout lorsque des mutants apparaissent pour un caractère donné. Dans le cas précis de *C. jejuni* et *C. coli*, l'unique critère de différenciation est l'hydrolyse de l'hippurate (*C. jejuni* peut l'hydrolyser alors que *C. coli* ne le peut pas), et il arrive parfois que cette distinction ne puisse pas se faire, car il existe des souches *C. jejuni* hippurate-négatives (Hébert et al., J. Clin. Microbiol., 1984, 20, 138-140, Totten et al., J. Clin. Microbiol., 1987, 25, 1747-1752).

Des approches utilisant l'hybridation moléculaire pour identifier les espèces appartenant au genre *Campylobacter* ont été proposées. Cependant, ces méthodes ne permettent l'identification qu'après culture, elles ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter cette bactérie dans les prélèvements biologiques. Ainsi, des méthodes d'identification et de classification des *Campylobacter* ont été proposées, utilisant soit des sondes radioactives (Ng et al., Mol. Cell. Probes, 1987, 1, 233-243), soit des sondes non radioactives (Chevrier et al., J. Clin. Microbiol., 1989, 27, 321-326), mais ces méthodes utilisent des sondes génomiques totales et nécessitent un enrichissement par culture du pathogène à détecter, car le seuil de détection est assez élevé, environ 10^5 bactéries (Chevrier et al., ci-dessus).

Des recherches de sondes nucléiques spécifiques de *C. jejuni*, dans un but de diagnostic d'espèce, ont été faites par Picken et al. (Mol. Cell. Probes, 1987, 1, 245-259), Korolik et al. (J. Gen. Microbiol., 1988, 134, 521-529) et Zhou et Wang (Zbl. Bakt., 1989, 272, 186-190), mais il subsiste des problèmes de spécificité et les séquences de ces sondes potentielles n'ont pas été déterminées.

Récemment les inventeurs, auteurs de la présente invention ont découvert une séquence d'ADN spécifique de l'espèce *C. jejuni* (FR-2 701 028). Cette séquence a été utilisée pour mettre au point un test PCR capable de détecter et d'identifier cette espèce dans un échantillon biologique (Stonnet et Guesdon, FEMS Immunol. Med. Microbiol., 1993, 7, 337-344). Compte tenu de la haute spécificité de la séquence, ce test PCR ne permet pas de détecter l'espèce *C. coli*, tout aussi importante cliniquement que *C. jejuni*. Récemment, une méthode d'identification et de discrimination spécifique parmi les *Campylobacter* thermophiles, dont *C. coli*, a été décrite par Eysers et al. (J. Clin. Microbiol., 1993, 31, 3340-3343). Toutefois, les amorces spécifiques d'espèce ont été choisies dans des régions hypervariables des gènes codant pour l'ARN ribosomique 23S, ce qui n'exclut pas une possibilité d'obtenir des résultats "faux-négatifs" lorsque l'ADN d'une souche à tester possède des variations juste au niveau de la séquence des amorces.

Toutefois ces raisons ont amené les inventeurs à choisir pour objectif d'isoler des séquences d'ADN spécifiques de *Campylobacter coli* et de développer à partir de ces séquences une méthode d'identification basée sur la technique PCR et la technique d'hybridation moléculaire. L'association de ces deux techniques permet d'atteindre un seuil de détection très bas, permettant de détecter et d'identifier une seule bactérie *C. coli* dans un échantillon biologique.

Les inventeurs ont à présent isolé une séquence nucléique utilisable pour la détection spécifique de l'espèce *Campylobacter coli*.

La présente invention a ainsi pour objet une séquence nucléotidique qui hybride spécifiquement avec l'acide nucléique génomique des souches appartenant à l'espèce *C. coli* et qui n'hybride pas dans les conditions

habituelles avec les acides nucléiques de campylobactéries n'appartenant pas à cette espèce, ni avec les acides nucléiques génomiques de bactéries proches du genre *Campylobacter*.

5 L'invention a également pour objet une séquence d'acide nucléique ayant la séquence SEQ ID n° 1, la séquence complémentaire de celle-ci, ou une séquence qui en diffère par mutation, insertion, délétion ou substitution d'une ou plusieurs bases.

10 Par "séquence qui en diffère par mutation, insertion, délétion ou substitution d'une ou plusieurs bases", on entend une séquence qui hybride avec la séquence SEQ ID n° 1 ou sa séquence complémentaire dans les conditions de stringence habituelles définies par
15 SAMBROOK J., FRITSCH E.F. et MANIATIS T. (1989) : Molecular Cloning : A Laboratory Manual, Ed. Cold. Spring Harbor Laboratory 9.47-9.62).

Ces conditions sont déterminées à partir de la température de stringence moyenne T_m .

20 De préférence, les séquences les plus avantageuses sont celles qui hybrident dans l'intervalle de température ($T_m - 15^\circ\text{C}$) à ($T_m - 20^\circ\text{C}$).

Les séquences en question comportent avantageusement au moins 12 nucléotides.

25 L'invention a également pour objet un vecteur de clonage contenant une séquence nucléotidique telle que définie ci-dessus, plus particulièrement le plasmide pCS1 contenant la séquence SEQ ID n° 1 déposé à la Collection Nationale de Culture de Microorganismes le 14 novembre
30 1994 sous le n° I-1491.

Les séquences nucléotidiques définies ci-dessus peuvent être des séquences d'ADN ou des séquences d'ARN.

35 La taille exacte du fragment de séquence SEQ ID n° 1 est de 604 pb.

Dans un premier temps, le fragment CS1 a été utilisé dans un test d'hybridation, suivant la technique de Southern, sur des ADNs génomiques de différentes souches de l'espèce *C. coli* (*C. coli* CIP 70.54, *C. coli* CIP 70.77, *C. coli* CIP 70.78, *C. coli* CIP 70.79, *C. coli* CIP 70.80, *C. coli* CIP 70.81, *C. coli* CIP 71,5, *C. coli* CIP 103753, *C. coli* A630-isolat clinique) digérés par l'enzyme *Hind*III, *Bgl*II, et *Eco*RV respectivement. Toutes les souches possèdent des fragments d'ADN qui hybrident avec la sonde CS1. Selon l'enzyme utilisée, *Hind*III, *Bgl*II, et *Eco*RV, ces fragments ont une taille de 2,3 kb, 3,5 kb ou 2,7 et 6 kb respectivement.

Dans un autre test de même type, le fragment CS1 a été utilisé comme sonde sur des ADNs cibles provenant d'autres espèces de *Campylobacter* (*Campylobacter jejuni*, *C. lari*, *C. fetus* subsp. *fetus*, *C. fetus* subsp. *venerealis*, *C. hyointestinalis*, *C. sputorum* subsp. *sputorum*, *C. sputorum* subsp. *bubulus*, *C. concisus*, *C. curvus* et *C. fecalis*) ou d'autres genres bactériens (*Escherichia coli*, *Arcobacter cryaerophylus*, *Helicobacter pylori*, *Salmonella typhimurium*). Ces ADNs cibles ont été digérés par l'enzyme *Hind*III. Une importante hybridation avec l'ADN de *C. coli* (témoin positif) a été observée, dès 3 h d'autoradiographie. Après 24 heures d'exposition, un léger signal est visible provenant de l'ADN de *C. jejuni*. Cette légère hybridation croisée n'est pas inexplicable, car il existe 30 à 50% d'homologie au niveau génomique entre *C. jejuni* et *C. coli*. Le fragment CS1 ne s'est hybridé à aucun des autres ADNs testés. Aucun signal n'était visible sur l'autoradiographie, même après des temps d'exposition très longs (72 heures).

La séquence SEQ ID n° 1 des parties ou des variants fonctionnellement équivalentes de celles-ci, peuvent être utilisés dans des techniques d'hybridation moléculaire pour la détection et l'identification de

Campylobacter coli.

Les variants fonctionnellement équivalents comprennent des séquences dans lesquelles des paires de bases ont été mutées, délétées, insérées ou substituées, sans que les propriétés essentielles à la spécificité de ces fragments soient affectées.

Les séquences nucléotidiques selon l'invention ont des applications diagnostiques et épidémiologiques en médecine humaine ou vétérinaire, notamment comme sondes nucléiques spécifiques de *Campylobacter coli* ou comme amorces oligonucléotidiques pour l'amplification d'une séquence spécifique de *Campylobacter coli*.

Les sondes selon l'invention comprennent avantageusement au moins 20 nucléotides consécutifs parmi les séquences ou les fragments de séquences mentionnés ci-dessus.

Les sondes sont des sondes d'ADN ou des sondes d'ARN.

Les séquences nucléotidiques décrites dans cette invention peuvent ainsi être utilisées comme sondes pour détecter spécifiquement et de manière directe des souches de *Campylobacter coli* dans un échantillon biologique. Les séquences non marquées peuvent être utilisées directement comme sondes, cependant les séquences sont généralement marquées par un élément radioactif (^{32}P , ^{35}S , ^3H , ^{125}I) ou par une molécule non-radioactive (biotine, acétylamino-fluorène, digoxigénine, 5-bromo-désoxyuridine) pour obtenir des sondes utilisables pour de nombreuses applications.

Dans ce dernier cas, on pourra utiliser l'une des méthodes de marquage décrites dans FR 2 422 956 et FR 2 518 755. La technique d'hybridation peut être réalisée de manières diverses (Matthews, J.A. et Kricka, L.J., Anal. Biochem. 1988, 169, 1-25). La méthode la plus générale consiste à immobiliser l'acide nucléique extrait

des cellules de *Campylobacter coli* sur un support (nitrocellulose, nylon, polystyrène,...) et à incuber, dans des conditions bien définies, l'acide nucléique cible immobilisé avec la sonde. Après l'hybridation, l'excès de sonde est éliminé et les molécules hybrides formées sont détectées par la méthode appropriée (mesure de la radioactivité, de la fluorescence ou de l'activité enzymatique liée à la sonde...).

Dans une autre application, les sondes d'acide nucléique décrites ici peuvent être utilisées comme sondes de capture. Dans ce procédé, la sonde est immobilisée sur un support et sert à capturer par hybridation spécifique l'acide nucléique cible extrait de *C. coli*. Si nécessaire, le support solide est séparé de l'échantillon et le duplex formé entre la sonde de capture et l'acide nucléique cible est ensuite détecté grâce à une seconde sonde de détection marquée par un élément facilement détectable.

Lorsqu'une quantité suffisante d'acide nucléique de *Campylobacter coli* peut être extraite à partir des prélèvements à analyser, les séquences décrites dans le brevet sont utilisables pour détecter et identifier les souches appartenant à *Campylobacter coli* directement dans ces prélèvements. Dans le cas contraire, une culture rapide en milieu liquide peut être réalisée avant l'extraction de l'acide nucléique de *Campylobacter coli*, ou bien la petite quantité d'acide nucléique de *Campylobacter coli* extrait du prélèvement peut être soumise à une technique d'amplification comme par exemple la technique PCR.

La séquence SEQ ID n° 1 et ses séquences dérivées peuvent également être utilisées pour sélectionner des amorces oligonucléotidiques, notamment pour la technique PCR.

Cette technique nécessite le choix de paires d'oligonucléotides encadrant le fragment qui doit être amplifié (brevet U.S. n° 4 683 202). Ces amorces oligodésoxyribonucléotidiques ou oligoribonucléotidiques ont
5 avantageusement une longueur comprise entre 18 et 30 et de préférence 18 à 22 nucléotides. L'une des deux amorces est complémentaire du brin (+) de la matrice et l'autre amorce est complémentaire du brin (-). Il est important que ces amorces ne possèdent pas de structure secondaire
10 ou de séquence complémentaire l'une de l'autre. D'autre part, la longueur et la séquence de chaque amorce doivent être choisies de manière à ce que les amorces ne s'hybrident pas avec d'autres acides nucléiques provenant de
15 cellules procaryotes ou eucaryotes, en particulier avec les acides nucléiques des *Campylobacter* n'appartenant pas à l'espèce *coli* et avec l'ADN ou l'ARN humain pouvant éventuellement contaminer le prélèvement.

Les amplimères sélectionnés comme amorces spécifiques pour l'amplification de séquences nucléiques
20 de souches appartenant à *Campylobacter coli* sont choisis par exemple en suivant la méthode décrite par Griffais et Coll. (Nucleic Acids Res. 1991, 19, 3887-3891).

A partir de la séquence SEQ ID n° 1, les inventeurs ont choisi des oligonucléotides pour réaliser
25 un test PCR. Grâce à ces oligonucléotides, ils ont obtenu une amplification spécifique de *Campylobacter coli*, aucune amplification n'était visible avec l'ADN des 10 autres *Campylobacter* mentionnés ci-dessus, en particulier
30 *C. jejuni*, ni avec l'ADN d'*Escherichia coli*, *Helicobacter pylori*, *Salmonella typhimurium*, *Arcobacter cryaerophilus*.

Un couple d'amorces tout particulièrement préféré est représenté par les oligonucléotides CSF et CSR issus de la séquence SEQ ID n° 1, de séquences :
Amorce CSF : 5'ATA TTT CCA AGC GCT ACT CCC C'
35 Amorce CSR : 5'CAG GCA GTG TGA TAG TCA TGG G'

Les fragments d'acide nucléique obtenus par amplification génique à l'aide des amorces décrites ci-dessus constituent également un objet de l'invention.

Les fragments amplifiés peuvent être identifiés après une électrophorèse en gel d'agarose ou de polyacrylamide, ou après une électrophorèse capillaire, ou encore après une technique chromatographique (filtration sur gel, chromatographie hydrophobe ou sur échangeur d'ions). La spécificité de l'amplification peut être contrôlée par hybridation moléculaire en utilisant comme sonde la séquence nucléotidique SEQ ID n° 1, des fragments de celles-ci, des plasmides contenant ces séquences ou des fragments de celles-ci, des oligonucléotides complémentaires de ces séquences ou fragments de séquences ou des produits d'amplification. Ces sondes peuvent être marquées ou non par des éléments radioactifs ou par des molécules non radioactives.

La présente invention a également pour objet une méthode de détection de la présence des souches de *Campylobacter coli* dans un échantillon biologique, caractérisée par les étapes suivantes :

i) mise en contact de l'échantillon biologique avec un couple de fragments oligonucléotidiques dits amorces, tels que définis précédemment, l'acide nucléique contenu dans l'échantillon ayant, le cas échéant, été préalablement rendu accessible à l'hybridation et dans des conditions permettant une hybridation des amorces à l'acide nucléique des souches appartenant à *Campylobacter coli* ;

ii) amplification de l'acide nucléique des souches de *Campylobacter coli* ;

iii) mise en évidence de l'amplification de fragments d'acide nucléique correspondant au fragment encadré par les amorces ;

iv) vérification éventuelle de la séquence du fragment amplifié, par exemple par hybridation de sonde spécifique, par séquençage ou par analyse de site de restriction.

5 La présente invention a en outre pour objet un kit ou coffret pour la détection de la présence de souches appartenant à *Campylobacter coli* dans un échantillon biologique, caractérisé en ce qu'il comporte les éléments suivants :

10 - un couple de fragments oligonucléotidiques tels que définis précédemment ;

- les réactifs nécessaires pour effectuer une amplification d'acide nucléique de souches appartenant à *Campylobacter coli* ;

15 - éventuellement, un composant permettant de vérifier la séquence du fragment amplifié, plus particulièrement une sonde nucléique telle que définie précédemment.

20 Ce kit contient plus avantageusement la ou les sondes marquées ou non. Celles-ci peuvent être en solution ou immobilisées sur un support. Le kit peut également contenir les réactifs nécessaires pour la lyse des bactéries et l'extraction des acides nucléiques cibles, ainsi que les solutions d'hybridation et de lavage correspondant à la méthode choisie.

25 L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples qui suivent et les figures annexées sur les lesquelles :

30 - la fig. 1 représente les profils d'hybridation des ADNs de différentes souches de *C. coli* avec le fragment CS1 utilisé comme sonde ;

- la fig. 2 représente les résultats d'électrophorèse obtenus après amplification par PCR avec le couple d'amorces CSF et CSR.

35

EXEMPLE 1 :

Construction de la banque génomique de *C. coli*. Criblage de la banque et détermination de la séquence du fragment spécifique :

5 L'ADN génomique de *C. coli* CIP 70.80 est digéré partiellement par l'endonucléase de restriction *Hind* III en faisant agir 0,5U d'enzyme par µg d'ADN dans le tampon recommandé par le fournisseur pendant 1 heure à 37°C. Ces conditions permettent l'obtention préféren-
10 tielle de fragments de longueur comprise entre 30 et 40 kb. Après digestion, le mélange contenant les fragments d'ADN est purifié par extractions au phénol/chloroforme et l'ADN est précipité à l'éthanol.

Le vecteur est le cosmide pH79. Il est
15 digéré par l'enzyme *Hind* III et déphosphorylé pour éviter toute autoligation.

La ligation s'effectue en mélangeant 700 ng de vecteur et 3 µg de fragments d'ADN de 30/40 kb, le mélange est laissé à 12°C pendant 18 heures après que
20 l'on ait ajouté 5 unités de T4 DNA ligase dans un tampon approprié.

Les cosmides recombinants sont encapsidés in vitro et utilisés pour transformer les bactéries (*E. coli* HB 101). Les bactéries transformées sont incubées 1 heure
25 à 37°C en milieu LB, puis étalées sur milieu sélectif Agar contenant 25 µg/ml d'ampicilline. Les colonies résistantes à l'ampicilline sont toutes testées pour leur sensibilité à la tétracycline, en effet le fragment d'ADN de 30/40 kb est inséré dans le vecteur de manière à
30 inactiver le gène de résistance à la tétracycline (Tet) et à conserver le gène de résistance à l'ampicilline (Amp).

Il est effectué une mini préparation d'ADN des 200 premières colonies transformantes résistantes à
35 l'ampicilline (Amp^r) et sensibles à la tétracycline

(Tet^r) selon la technique de la lyse alcaline. L'ADN de ces préparations est ensuite digéré par l'endonucléase de restriction *Hind* III, analysé en électrophorèse sur gel d'agarose à 0,8%, puis transféré sur des filtres de Nylon. L'ADN est fixé de façon irréversible par 3 minutes d'exposition aux UV à 254 nm.

Ces différents filtres sont incubés pendant 16-18 heures à 65°C dans un tampon 6X SSC (1X SSC correspond à 0,15M NaCl et 0,015M citrate de Na) contenant 10% de sulfate de dextrane, une solution de Denhardt 5X concentrée (une solution de Denhardt 1X correspond à 0,02% de Ficoll, 0,02% de polyvinylpyrrolidone et 0,02% d'albumine sérique bovine), 10mM EDTA, 0,5% de SDS, 100 µg/ml d'ADN dénaturé de sperme de saumon et l'ADN génomique, radiomarké au ³²P par multipriming, de l'une des deux espèces suivantes : *C. jejuni* CIP 70.2, *C. coli* CIP 70.80.

Après hybridation, les filtres sont lavés 2 fois 10 minutes en 2X SSC à 65°C, 1 fois pendant 30 minutes en 2X SSC + 0,1% SDS à 65°C, et enfin 1 fois pendant 10 minutes en 0,1X SSC à 65°C. Les filtres encore humides sont mis en autoradiographie à -80°C avec écran intensifiant de 15 minutes à 3 jours.

Les résultats de ces hybridations ont permis d'isoler un clone cosmidique contenant un fragment d'environ 2,3 kb nommé CS1.

La spécificité du fragment a été vérifiée comme décrit dans l'exemple n° 2.

Le fragment CS1 a été séquencé selon la méthode de Sanger en utilisant le kit de séquençage "T7 Sequencing kit" (Pharmacia) directement sur le cosmide, après dénaturation alcaline des deux brins d'ADN. Toutes les réactions de séquençage ont été réalisées avec du dATP marqué au ³⁵S.

La partie séquencée (600 paires de bases) du

fragment est représentée dans le listage joint à la description. La comparaison entre les banques de données "Genebank" et "EMBL" et les 600 nucléotides du fragment CS1 ainsi déterminés, ne fait ressortir aucune homologie
5 significative avec les séquences connues aujourd'hui.

EXEMPLE 2 :

Analyse d'ADN par la technique de Southern, en utilisant comme sondes les séquences d'acide nucléique
10 de l'invention :

La liste et les références des bactéries utilisées dans cette étude sont les suivantes :

Campylobacter :

15 *C. jejuni* subsp. *jejuni* CIP 70.2, CIP 70.86, CIP 81.1
C. jejuni subsp. *doylei* CIP 103751
C. coli CIP 70.80, CIP 71.5, CIP 70.81, CIP 70.79, CIP 70.78, CIP 70.77, CIP 70.54
20 *C. lari* CIP 102722
C. upsaliensis CIP 103681
C. fetus subsp. *fetus* CIP 5395
C. fetus subsp. *venerealis* CIP 6829
C. hyointestinalis (isolat clinique)
25 *C. sputorum* subsp. *sputorum* CCUG 9728
C. sputorum subsp. *bubulus* CIP 53103
C. concisus (isolat clinique)
C. fecalis CIP 12014
C. Curvus (isolat clinique)

30 **Non-Campylobacter :**

Arcobacter cryaerophila CCUG 17801
Helicobacter pylori CIP 101260
Escherichia coli HB101
Salmonella subsp. *typhimurium* C 53
35 *Salmonella* subsp. *salamae*

Salmonella subsp. *diarizonae*

Enterococcus faecalis JH2-SM

Enterococcus faecium D372 (isolat clinique)

Bacteroides fragilis E134 (isolat clinique)

5 *Bacteroides fragilis* F238 (isolat clinique)

Les résultats sont représentés à la fig. 1, le numéro des pistes correspondant dans l'ordre aux souches ci-dessus énumérées.

10 ADN de bactéries appartenant au genre
Campylobacter, autres que *C. coli* :

Après culture en milieu approprié (gélose au sang de mouton à 5%, Biomérieux), les *Campylobacter* sont traités de la manière suivante : les bactéries de chaque
15 boîte de Petri sont récoltées avec 2 ml de tampon TE-glucose (Tris-HCl pH 8 25 mM, EDTA 10 mM, glucose 50 mM), centrifugées pendant 5 minutes à 5000 g, le culot est redispersé et lavé en TE-glucose puis recentrifugé, les
20 bactéries sont resuspendues dans 100 µl de tampon TE (Tris-HCl 10 mM pH8, EDTA 1 mM) et l'ADN est extrait selon la technique de Pitcher et al. (Lett. Appl. Microbiol., 1989, 8, 151-156). Deux µg des ADN ainsi extraits sont soumis à une digestion totale par l'enzyme *Hind* III.
25 Les fragments obtenus sont ensuite séparés par électrophorèse sur gel d'agarose à 0,8% en TAE avant d'être transférés sur membrane de Nylon selon la technique de Southern.

Les fragments transférés sont analysés par hybridation moléculaire. La sonde CS1, marquée par du
30 ³²P, détecte spécifiquement l'ADN de *C. coli* et n'hybride pas avec les ADN génomiques d'autres *Campylobacter*, sauf très légèrement avec un fragment d'ADN situé sur le génome de *C. jejuni*. Cette hybridation croisée n'est détectable qu'après 18 heures d'exposition, alors que
35 l'ADN de *C. coli* est détectable dès 3 heures d'exposi-

l'ADN de *C. coli* est détectable dès 3 heures d'exposition.

5 ADN de bactéries n'appartenant pas au genre
 Campylobacter :

 L'ADN de ces bactéries et de *C. coli* utilisé
 comme contrôle positif a été hydrolysé par l'enzyme de
 restriction *HindIII*, puis les fragments ont été séparés
10 par électrophorèse en gel d'agarose et transférés sur une
 membrane de nylon Hybond-N. Ces différents fragments
 d'ADN sont analysés par hybridation moléculaire, en
 utilisant comme sonde le fragment CS1 marqué au ³²P selon
 la technique du kit "Random primed DNA labelling"
 (Boehringer). L'autoradiographie montre que la seule
15 espèce détectée est *C. coli*. Aucune hybridation n'est
 détectable sur les ADN des espèces non-campylobactérien-
 nes, même après 72 heures d'exposition.

EXEMPLE 3 :
20 Amplification enzymatique *in vitro* de l'ADN
 de *C. coli* avec les amorces définies à partir de la
 séquence d'acide nucléique faisant l'objet de l'inven-
 tion.

Choix des amorces :
25 Il a été démontré que c'est essentiellement
 l'extrémité 3' des amorces oligonucléotidiques qui
 détermine la spécificité de la PCR. Il est donc important
 que cette région 3' soit parfaitement spécifique de la
 cible à amplifier.

30 Etant donné que le génome de *Campylobacter*
 présente un très faible pourcentage de guanine et
 cytosine (entre 28 et 38% de G+C), les inventeurs ont
 pensé que des amorces dont l'extrémité 3' était riche en
 G+C pouvaient présenter un important degré de spécifici-
35 té.

A l'aide d'un programme informatique les inventeurs ont recherché, à l'intérieur de la séquence CS1, des zones riches en G+C qui sont présentes une seule fois sur CS1. C'est à partir de ces régions que la
5 séquence des amorces a été orientée et complétée de façon à obtenir une longueur d'une vingtaine de nucléotides.

Synthèse des amorces oligonucléotidiques :

Les amorces dérivées de la séquence CS1, appelées CSF et CSR et ayant une longueur de 22 nucléoti-
10 des, ont été synthétisées à l'aide d'une méthode des phosphoramidites sur un automate par le service de Chimie organique de l'Institut Pasteur. La concentration de chaque amorce est déterminée au spectrophotomètre.

Amplification :

15 La technique d'amplification enzymatique *in vitro* (PCR) est réalisée selon le protocole décrit par Saiki et al. (Science, 1988, 239, 487-491) en utilisant 1 μ M des oligonucléotides CSF et CSR et 30-100 ng d'ADN de différentes souches de *Campylobacter* avec 0,5 unité
20 de Taq polymérase dans un tampon contenant 25 mM de KCl, 20mM de Tris-HCl pH 8,5, 1,5 mM de $MgCl_2$, 200 μ M de désoxyribonucléotides triphosphates et 100 μ g/ml d'albumine sérique bovine, le volume final de la réaction étant de 50 μ l. Les paramètres des étapes de la PCR ont été
25 choisis de la façon suivante : 5 minutes à 94°C, 1 minute à 60°C, 1 minute à 72°C, puis (1 minute à 94°C, 1 minute à 60°C, 1 minute à 72°C) 38 fois et un dernier cycle 1 minute à 94°C, 1 minute à 60°C, 5 minutes à 72°C. Quarante cycles sont ainsi réalisés en utilisant un
30 appareil automatique. Après le dernier cycle, les échantillons sont maintenus à 4°C jusqu'à l'analyse.

Analyse électrophorétique sur un gel d'agarose des échantillons amplifiés :

Dix μ l des échantillons amplifiés sont
35 déposés sur un gel d'agarose à 2% dans un tampon TBE

(0,04 M Tris-borate, 0,001M EDTA) contenant 1 µg/ml de bromure d'éthidium. Les fragments amplifiés sont visualisés sous UV et les gels sont photographiés en utilisant un film Polaroid 667.

5 Les résultats obtenus avec des ADNs de différentes espèces de *Campylobacter* et les amorces CSF et CSR montrent que la longueur du fragment amplifié obtenu correspond à la longueur théorique attendue avec ce couple d'amorces et qui est de 258 paires de bases.

10 En complément de ces résultats, aucun fragment amplifié n'est visible lorsque l'ADN analysé est extrait des espèces ou genres suivants :

15 *C. jejuni* subsp. *jejuni*, *C. jejuni* subsp. *doylei*, *C. lari*, *C. upsaliensis*, *C. fetus* subsp. *fetus*, *C. fetus* subsp. *venerealis*, *C. hyointestinalis*, *C. cryaerophila*, *C. sputorum* subsp. *sputorum*, *C. sputorum* subsp. *bubulus*, *C. fecalis*, *C. concisus*, *C. curvus*, *Escherichia coli*, *Helicobacter pylori*, *Arcobacter cryaerophilus*, *Salmonella* subsp. *salamae*, *Salmonella* subsp. *diarizonae*, *Enterococcus fecalis*, *Enterococcus faecium*, *Bacteroides fragilis*
20 ou de cellules humaines. Bien entendu, toutes les souches de *C. coli* testées ont donné des résultats positifs, qu'il s'agisse de souches de collection ou d'isolats de malades.

25

En conclusion, l'ensemble de ces résultats démontre que, à l'aide de la technique PCR et des amorces décrites dans cette invention, il est possible de détecter spécifiquement l'espèce *C. coli*, ce qui laisse
30 penser que des isolats de malades et des échantillons biologiques infectés par *C. coli* pourront être identifiés, rendant ainsi la méthode utilisable dans le domaine de la bactériologie clinique, en médecine vétérinaire et dans l'industrie agro-alimentaire.

35

LISTE DES SEQUENCES

I - INFORMATIONS GENERALES

5

(1) DEMANDEUR : Institut Pasteur

(2) TITRE DE L'INVENTION :

10

Séquences nucléotidiques hybridant spécifiquement avec une séquence nucléique génomique de *Campylobacter coli*, applications dans le diagnostic d'une infection à *Campylobacter coli*.

15

(3) NOMBRE DE SEQUENCES : 3

II - INFORMATIONS POUR SEQ. ID N° 1 :
CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

20

TYPE : Nucléotide

LONGUEUR : 604 paires de bases

NOMBRE DE BRINS : double

CONFIGURATION : linéaire

TYPE DE MOLECULE : ADN

ORGANISME : *Campylobacter coli*

25

NOM : CS1

DESCRIPTION DE LA SEQUENCE :

30

35

10 20 30 40 50
 TTAAAAAGAC TTATTTCCAT ACTAAATCAA CCCAAATAAA AATAAAAAAT
 60 70 80 90 100
 5 ATTATACTTA AATATCCATT TAAAGTAAAA AACGCTTTAT CAATGTGAGC
 110 120 130 140 150
 AAAATTTTTA TGTACAATTT TATGTTCAAA AGCCAAAATA ATACCGCTGA
 160 170 180 190 200
 10 TAATCATTCC AAATAATGCA ATATTTCCAA GCGCTACTCC CCAAACCTGC
 210 220 230 240 250
 CAAACAAAAA GTAGCCAAAA TAATACTGCT AATACATGGC AAAAGCCGAG
 260 270 280 290 300
 ATAAATAAAG TCGCCTTAGA GCCAAATTTA GCAGGGATAG AATGAAGTCC
 310 320 330 340 350
 15 TACTTTTTTA TCATACTCCA TATCTTGTAAG AGAGTAAAGC AAATCAAATC
 360 370 380 390 400
 CAGCCGTCCA AAAAGTTACC CCTAAGCATA AAATCACACT ATAAATGTGA
 410 420 430 440 450
 20 ATTTACCCCA TGACTATCAC ACTGCCTGCA ATAGGTGCAA GTCCTAAACA
 460 470 480 490 500
 AAATCCTAAA ACTAAATGCG CTAAAGACTA AAGCGTTTAA AAGCAGAATA
 510 520 530 540 550
 AATTGCCAAT ACAAAAAGCA CAGGAAAAGA AAGATAAAAA GCCAAAGTAT
 560 570 580 590 600
 25 TGATAAAATA AGAACACAAT ATAAAAATAA TCGCATTAGG ATAATAAAAT
 604
 CCAA

30 III - INFORMATIONS POUR SEQ. ID N° 2 :
 CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :
 TYPE : Nucléotide
 LONGUEUR : 22 paires de bases
 NOMBRE DE BRINS : simple
 35 CONFIGURATION : linéaire

22

TYPE DE MOLECULE : oligonucléotide de synthèse
ORGANISME : *Campylobacter coli*
NOM : CSF
DESCRIPTION DE LA SEQUENCE

5

Amorce CSF : 5'ATA TTT CCA AGC GCT ACT CCC C³'

IV - INFORMATIONS POUR SEQ. ID N° 3 :
10 CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :
TYPE : Nucléotide
LONGUEUR : 22 paires de bases
NOMBRE DE BRINS : simple
CONFIGURATION : linéaire
15 TYPE DE MOLECULE : oligonucléotide de synthèse
ORGANISME : *Campylobacter coli*
NOM : CSR
DESCRIPTION DE LA SEQUENCE :
5'CAG GCA GTG TGA TAG TCA TGG G³'
20

REVENDEICATIONS

1. Séquence d'acide nucléique qui hybride spécifiquement avec un acide nucléique génomique des souches appartenant à l'espèce *Campylobacter coli* et qui n'hybride pas dans les conditions habituelles avec un acide nucléique de campylobactéries n'appartenant pas à cette espèce, ni avec un acide nucléique génomique de bactéries proches du genre *Campylobacter*, caractérisée en ce qu'elle possède la séquence nucléotidique SEQ ID N° 1, la séquence complémentaire de celle-ci, ou une séquence qui en diffère par mutation, insertion, délétion ou substitution d'une ou plusieurs bases.

2. Vecteur de clonage caractérisé en ce qu'il contient une séquence nucléotidique selon la revendication 1.

3. Plasmide déposé à la Collection Nationale de Culture de Microorganismes, le 14 novembre 1994, sous le n° I-1491.

4. Sonde nucléique spécifique des acides nucléiques de *Campylobacter coli*, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins 20 nucléotides consécutifs choisis parmi les séquences nucléotidiques selon la revendication 1.

5. Sonde nucléique selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'elle est immobilisée sur un support et utilisée comme sonde de capture.

6. Couples d'amorces oligonucléotidiques spécifiques pour l'amplification d'une séquence nucléique de *Campylobacter coli*, caractérisés en ce qu'ils comprennent des paires d'oligonucléotides ayant de 18 à 30 nucléotides, de préférence 18 à 22 nucléotides choisis parmi les séquences selon la revendication 1.

7. Couple d'amorces oligonucléotidiques spécifiques pour l'amplification d'une séquence nucléique de

Campylobacter coli selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il est constitué par les paires oligonucléotidiques de séquences :

5 5'ATA TTT CCA AGC GCT ACT CCC C^{3'}
 5'CAG GCA GTG TGA TAG TCA TGG G^{3'}

8. Fragment d'acide nucléique obtenu en amplifiant un acide nucléique de *C. coli* par une technique d'amplification génique, notamment par la technique PCR, au
10 moyen d'un couple d'amorces oligonucléotidiques selon la revendication 6 ou 7.

9. Méthode de détection de la présence de *Campylobacter coli* dans un échantillon biologique, caractérisée
15 par les étapes suivantes :

 a) mise en contact de l'échantillon biologique avec un couple d'amorces selon la revendication 6 ou 7, l'acide nucléique de *Campylobacter coli* contenu dans l'échantillon biologique ayant, le cas échéant, été rendu
20 préalablement accessible à une hybridation, et dans des conditions permettant une hybridation des amorces à l'acide nucléique appartenant à *Campylobacter coli* ;

 b) amplification de l'acide nucléique appartenant à *Campylobacter coli* ;

25 c) mise en évidence de l'amplification de fragments d'acide nucléique de *Campylobacter coli* correspondant au fragment encadré par les amorces ;

 d) vérification éventuelle de la séquence du fragment amplifié, par exemple par hybridation de sonde
30 spécifique, par séquençage ou par analyse de site de restriction.

10. Kit de détection de la présence de *Campylobacter coli* dans un échantillon biologique, caractérisé en ce qu'il comprend les éléments suivants :

35 - un couple d'amorces selon la revendication 6 ou

7 ;

- les réactifs nécessaires pour effectuer une amplification d'un acide nucléique de *Campylobacter coli* ;

5 - éventuellement un composant permettant de vérifier la séquence du fragment amplifié, plus particulièrement une sonde nucléique selon la revendication 4 ou 5.

10

1/1

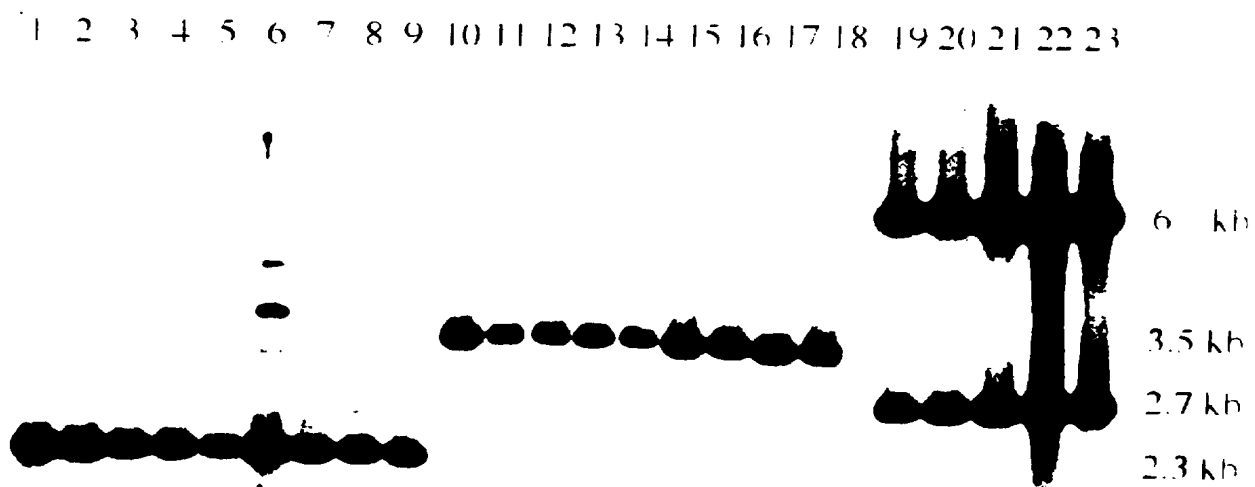


FIG.1

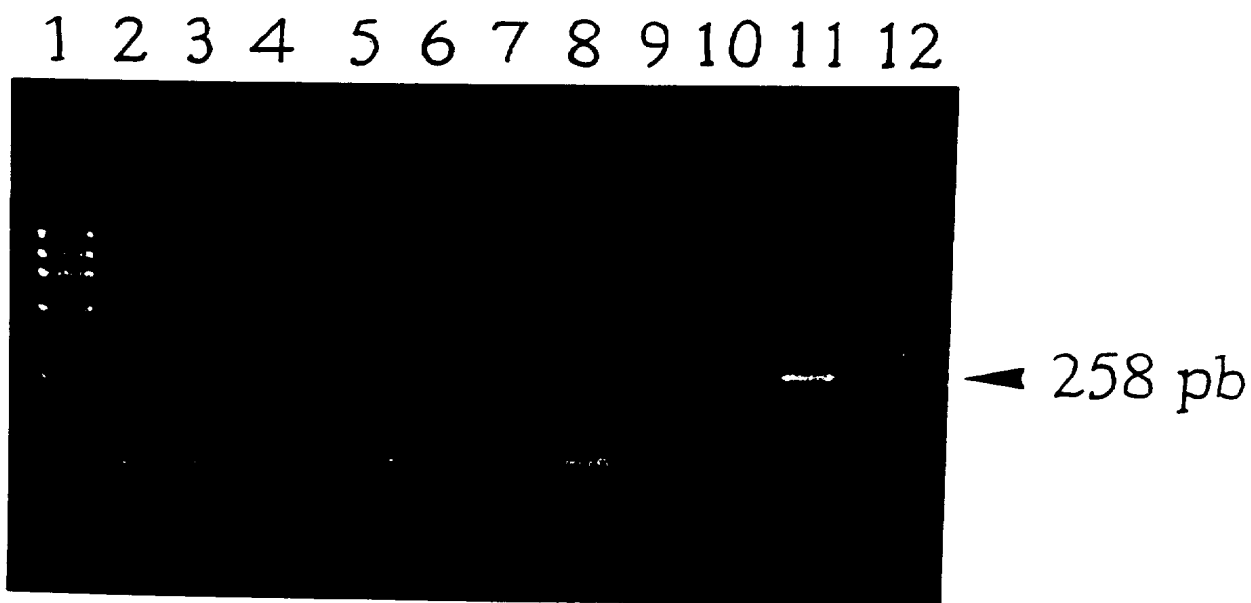


FIG.2